

iPad アンケート管理システム



操作マニュアル

株式会社 システムメディア



目 次

mediQ について	1
アンケートをしていただくときの流れ	2
アンケート途中で中断する場合	2
各画面と操作方法	
ログイン画面	4
メインメニュー画面	5
USERID・PASSWORD 設定画面	6
管理メニュー画面	7
基本情報設定画面	7
アンケート内容登録・編集画面	8
アンケート回答対象患者選択・管理	13
患者個人情報設定画面	15
アンケートメニュー画面	17
アンケート開始画面	18
アンケート回答画面	19
アンケート終了画面	20
回答済患者一覧画面	22
回答結果参照画面	23
表示対象質問一覧画面	24
質問回答グラフ表示画面	25

mediQ について

「mediQ」は iPad で使用する病院様向けのアンケート管理システムです。

FilemakerPro で作成したシステムになりますので、使用する際は iPad に FilemakerGo が必要になります。

FilemakerGo は AppStore から無料でインストールできます。


・アンケートの実施は iPad でしかできませんが、回答結果を確認する際は、iTunes で iPad とパソコンを同期させて FilemakerGo に入っている mediQ のファイルをパソコンに取り込めばパソコンで閲覧することができます。

※ パソコン上では mediQ で使用できる画面やボタンの動作の制限がかかります。

※ mediQ をご利用いただくには、(株) システムメディアとのライセンス契約が必要です。


アンケートをしていただくときの流れ

■通常の流れ■

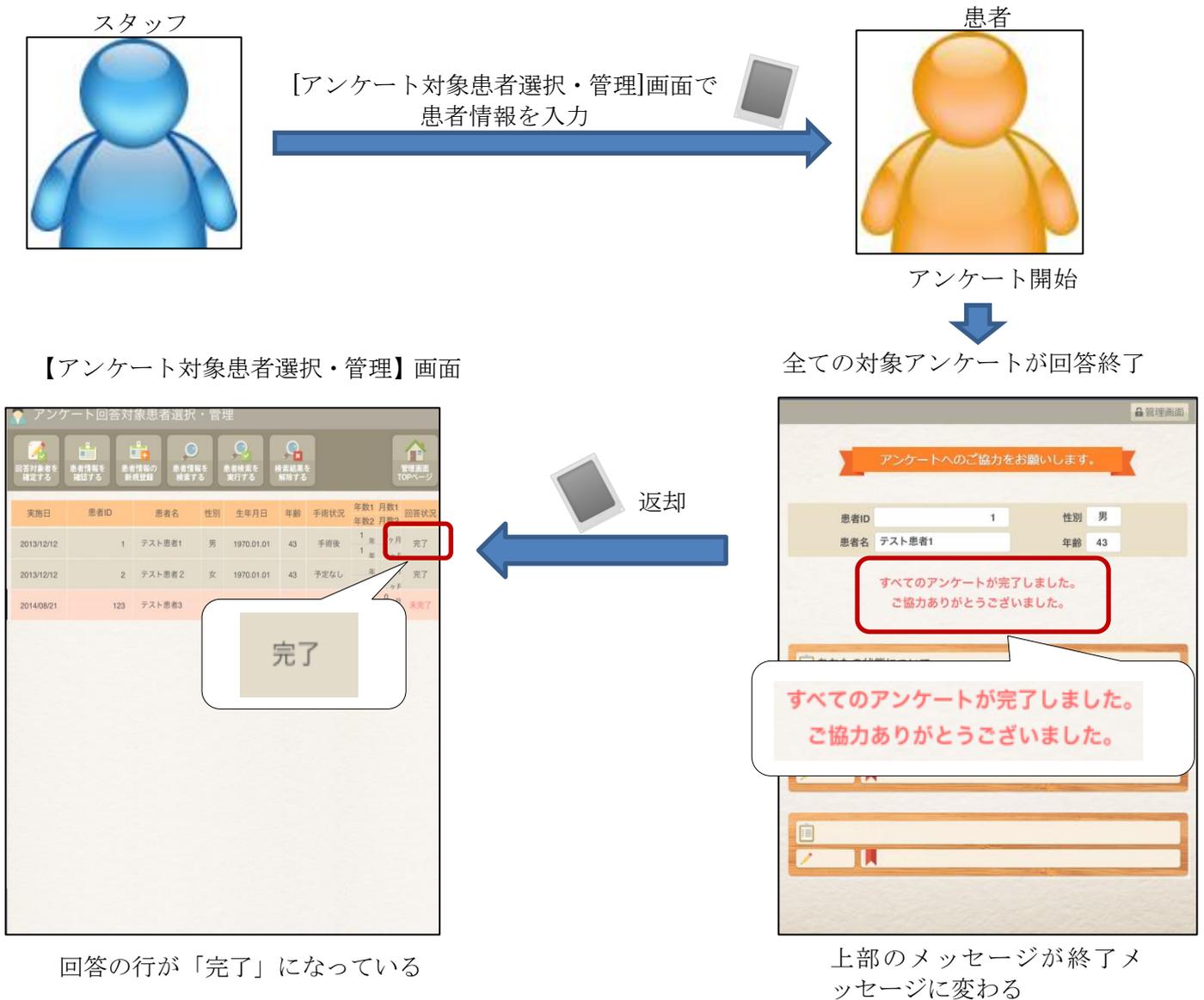


アンケート途中で中断する場合

アンケート入力画面の右上の「終了」ボタンをクリック

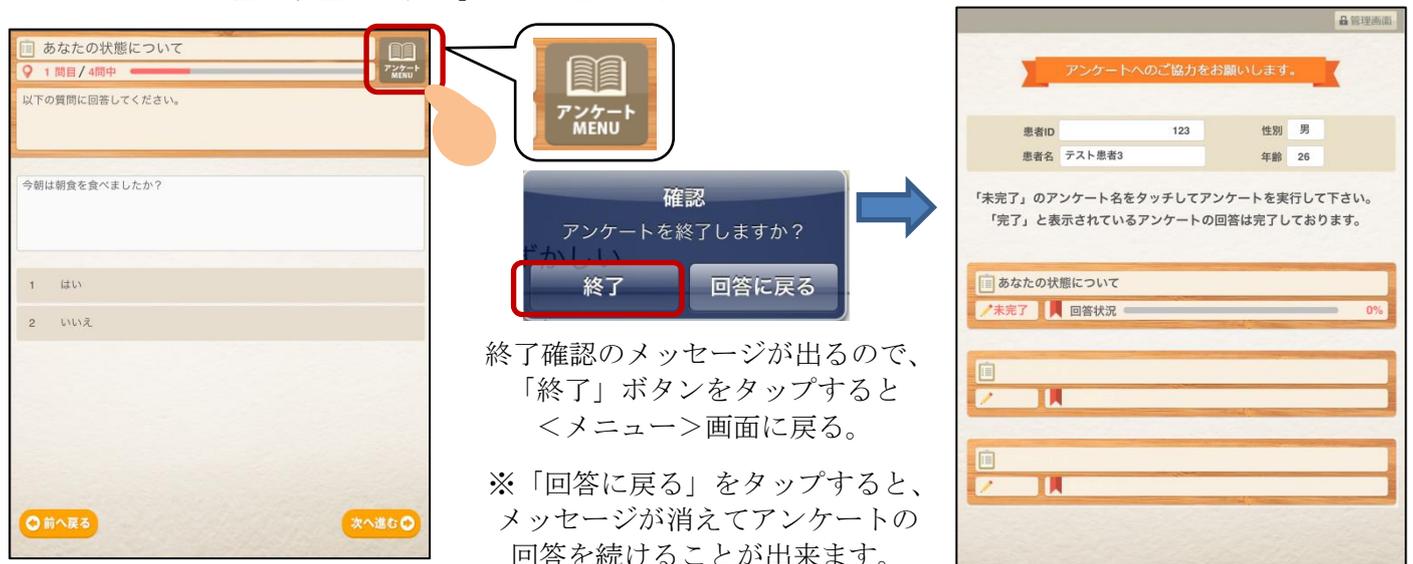


■途中でアンケートを中断した場合■

スタッフ

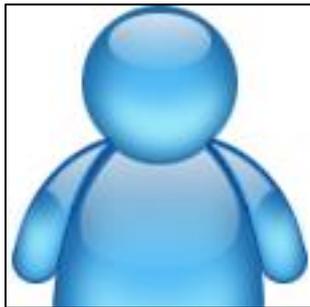

[アンケート対象患者選択・管理]画面で
患者情報を入力

患者

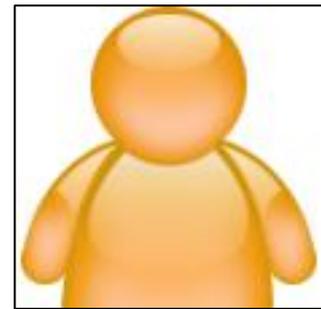

アンケート開始

診察などにより
アンケートを中断

【アンケート対象患者選択・管理】画面

実施日	患者ID	患者名	性別	生年月日	年齢	手術状況	年数1 年数2	月数1 月数2	回答状況
2013/12/12	1	テスト患者1	男	1970.01.01	43	手術後	1年 1年	8ヶ月 1ヶ月	完了
2013/12/12	2	テスト患者2	女	1970.01.01	43	予定なし	—年 —年	—ヶ月 —ヶ月	完了
2014/08/21	123	テスト患者3	男	1988/08/21	26	手術後	7年 —年	0ヶ月 —ヶ月	未完了



途中のものは回答の行が
「未完了」になっている

アンケートをしていた患者様が戻られるまで、他の患者情報を入力し、他のの方にアンケートをしていただいかまいません。

アンケートへのご協力をお願いします。

患者ID: 123 性別: 男
患者名: テスト患者3 年齢: 26

「未完了」のアンケート名をタッチしてアンケートを実行して下さい。
「完了」と表示されているアンケートの回答は完了しております。

あなたの状態について

完了 回答状況 100%

アンケート 2

未完了 回答状況 0%

まだ終わっていないアンケートは
「未完了」と表示されている

中断した患者様が戻られたら、<患者情報一覧画面>から「未完了」になっている先ほどの患者情報を選択して<メニュー画面>にし、アンケートの続きをしていただけます。

「終」と表示されていない
アンケートを再開

【アンケート対象患者選択・管理】画面

実施日	患者ID	患者名	性別	生年月日	年齢	手術状況	年数1 年数2	月数1 月数2	回答状況
2013/12/12	1	テスト患者1	男	1970.01.01	43	手術後	1年 1年	8ヶ月 1ヶ月	完了
2013/12/12	2	テスト患者2	女	1970.01.01	43	予定なし	—年 —年	—ヶ月 —ヶ月	完了
2014/08/21	123	テスト患者3	男	1988/08/21	26	手術後	7年 —年	0ヶ月 —ヶ月	未完了



アンケートへのご協力をお願いします。

患者ID: 123 性別: 男
患者名: テスト患者3 年齢: 26

「未完了」のアンケート名をタッチしてアンケートを実行して下さい。
「完了」と表示されているアンケートの回答は完了しております。

あなたの状態について

完了 回答状況 100%

アンケート 2

完了 回答状況 100%

対象アンケートが完了すると
「完了」と表示される



回答状況が「完了」になっている

各画面と操作方法

【ログイン画面】

mediQ を起動すると、ログイン画面が開きます。



●ライセンスコード入力

初回実行時に、ライセンスコードを入力する必要があります。

取得したライセンスコードをログイン画面の入力欄に入力後、「認証」ボタンをタップしてください。

「認証」ボタンをタップしてライセンスコードの認証に成功すると使用制限が解除されます。

通常使用する際は、mediQ で登録した「USER ID」と「PASSWORD」を入力してログインします。



●USER ID

ユーザーIDを入力します。

初回起動時は、空白のままでログインします。

●PASSWORD

パスワードを入力します。

初回起動時は、空白のままにログインします。

*USER IDとPASSWORDは、mediQ内で設定できます。
設定については「USERID・PASSWORD設定」を参照。

・USER IDとPASSWORDを入力後「LOGIN」ボタンをタップするとメインメニューの画面が開きます。

【メインメニュー】

ログインすると最初に【メインメニュー】の画面が開きます。



●アンケート回答対象患者選択・管理



一番上部にある、「アンケート回答対象患者選択・管理」ボタンをタップすると、患者情報の登録や情報を確認するための画面に移動します。

●アンケート管理メニュー



各アンケートの質問内容を登録したり、アンケート結果を確認したりする「管理メニュー画面」に移動します。



●USER ID・PASSWORD 設定



「USER ID・PASSWORD 設定」ボタンをタップすると、mediQのログイン時に必要なUSER IDとPASSWORDを設定する画面に移動します。

●システムからログアウトする



「システムからログアウトする」ボタンをタップすると、ログアウトしてログイン画面に戻ります。


【USER ID・PASSWORD設定】

mediQにログインする時に使用する、USER IDとPASSWORDを設定する画面になります。



The screenshot shows a browser window titled "mediQ (birano-PC)". The address bar shows "USER ID・PASSWORD設定". The page content includes a header with a home icon and "管理画面 TOPページ". Below the header is a message box: "【 USER IDとPASSWORDを直接書き換えて変更して下さい。】". Underneath are two input fields: "USER ID" and "PASSWORD".

画面の「USER ID」と「PASSWORD」の入力欄にIDとPASSWORDを入力してください。

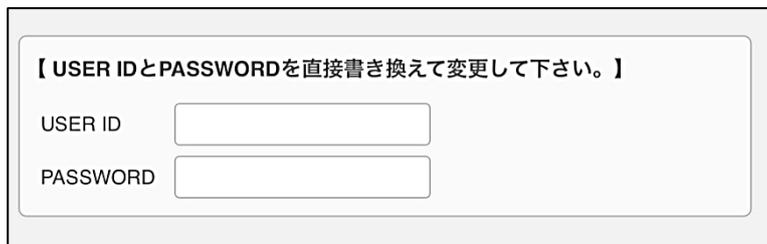


This is a close-up of the input fields from the previous screenshot. It shows the message box: "【 USER IDとPASSWORDを直接書き換えて変更して下さい。】". Below it are two input fields: "USER ID" and "PASSWORD".

次回ログインする時に、この画面で設定したIDとPASSWORDを入力してログインすることになります。
登録した内容は忘れないようにしてください。

PASSWORDは「アンケートメニュー」画面から「メインメニュー」に戻る時にも使用します。

【管理メニュー画面】

各アンケートの設定や設問内容、結果を閲覧するための管理画面になります。

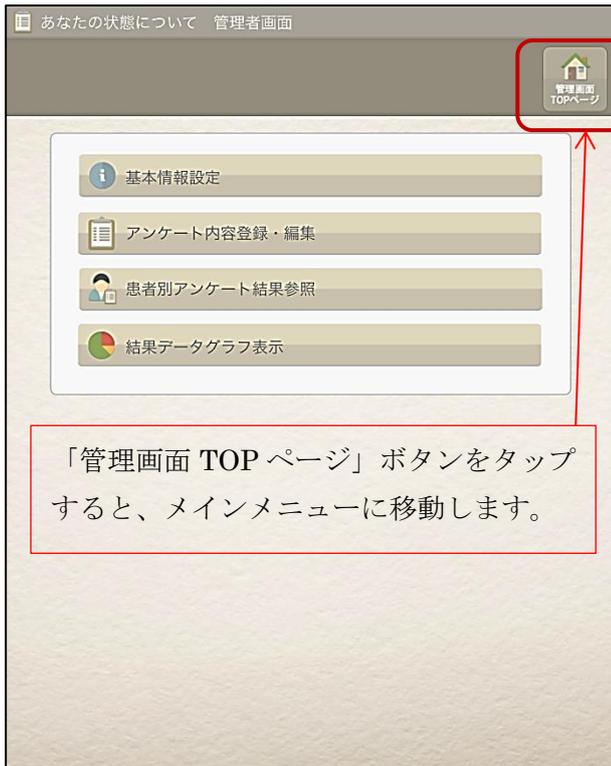

●基本情報設定ボタン

アンケートのタイトルや概要などの設定を行うための、「基本情報設定画面」に移動します。

●アンケート内容登録編集ボタン

アンケートの質問や選択肢を登録するための画面に移動します。

●患者別アンケート結果参照ボタン


アンケートに回答した患者様の結果を確認するための画面に移動します。

●結果データグラフ表示ボタン

アンケートの回答結果をグラフで確認するための画面に移動します。

【基本情報設定画面】

アンケートのタイトルや概要、注意点などを入力するための画面になります。

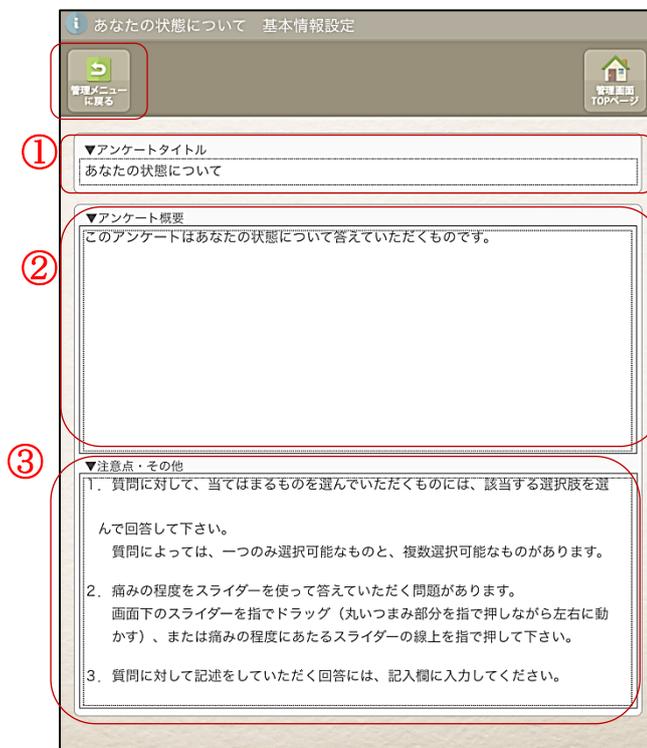

①アンケートタイトル

アンケートの名前を入力します。入力したアンケートタイトルが画面の一番上に表示されます。



↑アンケートタイトル

②アンケート概要

何のためのアンケートなのか、またどういった内容のアンケートなのかを入力します。

③注意点・その他

アンケートを回答するに当たり、患者様に注意しておきたいことやお知らせしたいことなどを入力します。

* 「アンケート概要」や「注意点・その他」で入力した内容はアンケートの開始画面に表示されます。

●管理メニューに戻るボタン



「管理メニューに戻る」ボタンをタップすると、「管理メニュー画面」に移動します。

【アンケート内容登録・編集画面】

アンケート内容の質問や選択肢を登録するための画面になります。

●質問No.

アンケートの質問No.が表示されます。No.は自動採番で割り振られます。



質問No.の左右にある矢印ボタンをタップすると、登録されている前後の質問登録ページに移動します。

※左側の矢印ボタンをタップすると前へ、右側の矢印ボタンをタップすると後ろへ移動します。



真ん中に表示されている数字が現在編集中的の質問No.です。

●ボタンの説明

「アンケート回答対象患者選択・管理」画面上部にあるボタンの説明をします。



・「新規質問を追加する」ボタン



アンケートの質問を新しく登録する際に使用します。

ボタンを押すと以下のメッセージが表示されて、

選択したボタンに応じた質問の内容が現在の質問の最後に追加されます。

複写しない

「複写しない」ボタンは全て空白の状態で作成します。

複写する

「複写する」ボタンは、現在の質問No.の内容を利用して新しい質問を作成します。2つ以上の質問で「回答説明」や「選択肢」が同じ場合などに使用します。

例) 現在の質問の最後が質問No.2で、新しく質問No.3を追加する時

質問No.2と質問No.3の質問の選択肢の内容が同じ場合、質問No.2の画面でボタンをタップすると

質問No.2の内容を複写して質問No.3が作成されます。必要に応じて質問No.3の内容を書き換えます。

キャンセル

「キャンセル」ボタンを押すと新規質問の作成を中止します。

・「この質問を削除する」ボタン



アンケートの質問を削除する際に使用します。
削除したい質問画面のところでボタンを押してください。
ボタンを押すと確認メッセージが出ます。



「はい」を選択すると該当の質問が削除されます。「いいえ」を選択すると質問の削除を中止します。

※一度削除した問題は元に戻せません。

・「管理メニューに戻る」ボタン



質問登録画面の直前の「管理メニュー」に戻る際に使用します。
質問の登録が終わって「管理メニュー」に戻る時に押してください。
ボタンを押すと質問が入力の途中であっても、直前まで入力した質問内容が登録された状態で画面を移動します。

●回答形式切替

回答の形式を選択する際に使用します。



mediQ で選択できる回答形式は以下の4つです。

1. 単一選択

質問に対して選択肢が一つだけ選択可能な設問を作成します。
患者様がアンケートを実施する時、「単一選択」になっている質問に対して設問は一つしか選択できません。

2. 複数選択

質問に対して選択肢が複数選択可能な設問を作成します。
患者様がアンケートを実施する時、「複数選択」になっている質問に対して設問は複数選択できます。

3. 記述

質問に対して文章で回答する設問を作成します。
患者様がアンケートを実施する時、「記述」になっている質問に対しては文字を入力して回答します。

4. スライダー

痛みの程度など、質問に対して感覚的に回答する設問を作成します。

患者様がアンケートを実施する時、感覚をもとに画面のスライダーを左右に動かすことで回答します。

※注意点

単一選択から複数選択、又は複数選択から単一選択に切り替える時は、入力済みの選択肢はそのままですが、それ以外の形式に切り替える時は、システム上入力済みの選択肢は削除されます。

記述やスライダーから単一選択、複数選択へ切り替える時も同様です。

入力済みの選択肢が削除される際は、切替の時の確認のメッセージが表示されます。

●回答説明・質問内容

The screenshot shows a survey editor interface with two text input fields. The first field, labeled '▼回答説明', contains the text '以下の質問に回答してください。' (Please answer the following questions.). The second field, labeled '▼質問内容', contains the text '今朝は朝食を食べましたか?' (Did you eat breakfast this morning?). Both fields have a vertical scrollbar on the right side.

回答説明：アンケートの質問に対して補足的な内容がある場合は入力してください。

質問内容：アンケートの質問を入力してください。

アンケートの質問に対して、選択肢から一つ選ぶのか、複数選択するのかなども回答説明や質問内容に記入することで、回答者が選択しやすくなります。

●入力チェック・点数計算区分

The screenshot shows two settings for a survey question. The '入力チェック' (Input Check) dropdown is set to '必須' (Required). The '点数計算区分' (Point Calculation Category) dropdown is currently empty.

・入力チェック

アンケートの質問に対して必ず回答をしてほしい時は「入力チェック」を「必須」にします。

必須にすることで、アンケート回答時に回答が選択されずに次の質問に進もうとした場合は、回答が選択されていない旨のメッセージが表示されて次の質問に進めないようになります。

必ずしも回答しなくてもいい質問に対しては「入力チェック」を「未入力可」にします。

「未入力可」になっている場合は、回答を選択しなくても次の質問に進めるようになっています。

・点数計算区分

アンケート回答後に点数を集計したい場合は点数計算区分を「計算する」にします。

「計算する」にすることで合計点数に集計されます。

計算しないにすると、その質問の回答の点数は合計点に集計されません。

●回答選択肢入力・文言入力

「回答形式」によって回答画面が変わるので、回答形式に合わせた選択肢や文言を入力します。

・単一選択と複数選択の場合

「単一選択」と「複数選択」の場合は、質問登録の画面の下部が以下ようになります。

入力チェック	<input type="text" value="必須"/>	点数計算区分	<input type="text"/>	<input type="button" value="+ 回答追加"/>
回答No	表示用回答No	回答内容	点数	削除
1	1	はい	1	<input type="button" value="−"/>
2	2	いいえ	0	<input type="button" value="−"/>

質問に対する選択肢を入力していきます。

「回答追加」ボタンを押すことで、回答を一行追加します。

入力した設問を削除したい場合は右側の「削除」項目の赤丸のボタンを押します。

一番左の「回答No.」はシステム管理上変更できません。

選択肢に対して「1」、「2」以外のものを割り振りたいときは「表示用回答No.」を変更してください。

(例えば a, b, c で選択肢を割り振りたい時は「表示用回答No.」に a, b, c を入力します。)

・記述の場合

記述の場合は、質問登録の画面の下部が以下ようになります。

▼記述枠内容 (デフォルト文章を入れておきたい場合のみに入力して下さい。)
<div style="border: 1px solid gray; height: 150px;"></div>

記述の場合は特に入力する必要がありません。

画面上入力できるようになっているので、必要な場合は入力が可能です。

その場合、入力した内容がそのままアンケートの回答画面に入力された状態で表示されます。

・スライダーの場合

スライダーの場合は、以下のような質問登録の画面の下部が以下ようになります。

▼スライダー上の表示文言設定

最小値文言	最大値文言
全く痛みはない	我慢できないくらい痛い



質問に応じて「最小値文言」と「最大値文言」を入力します。

回答後丸の位置が一番左端にある場合は点数が「0」、一番右端にある場合は点数が「100」で登録されます。

例えば痛みを問う場合、痛みが全くない状態を「0」とする場合、「最小値文言」に「全く痛みはない」、「最大値文言」に「我慢できないくらい痛い」といった形で入力します。

●表示条件設定

【表示条件設定】 この質問を条件表示したい場合、下記にて条件内容を設定できます。

表示条件

質問No

の回答No

を選択した際にこの質問を表示する。

特定の質問で特定の選択肢を選んだ時のみに表示させたい質問の場合は、「表示条件設定」を入力します。

例えば、質問No. 10の5を選択した時のみ質問No. 11を回答させたいとき。

質問No. 11の画面で、「表示条件」で「設定する」を選択します。

以下の入力欄に質問No.の10と回答No.の5を入力します。

質問No

10

の回答No

5

を選択した際にこの質問を表示する。

表示条件が設定されている場合、条件に当てはまる質問で該当する選択肢が選ばれていない時は、その質問No.をとばしてアンケート回答を進めていきます。

【アンケート回答対象患者選択・管理】

登録済の患者様が一覧で表示されています。また、新規で患者様を登録する時や患者様の情報を確認する場合もこの画面から行います。

アンケート回答対象患者選択・管理											
回答対象者を確定する 患者情報を確認する 患者情報の新規登録 患者情報を検索する 患者検索を実行する 検索結果を解除する 管理画面TOPページ											
実施日	患者ID	患者名	性別	生年月日	年齢	手術状況	年数1	月数1	年数2	月数2	回答状況
2013/12/12	1	テスト患者1	男	1970.01.01	43	手術後	1年	8ヶ月	1年	1ヶ月	完了
2013/12/12	2	テスト患者2	女	1970.01.01	43	予定なし		ヶ月			完了
2014/08/21	123	テスト患者3	男	1988/08/21	26	手術後	7年	0ヶ月			未完了

「アンケート回答対象患者選択・管理」では、「患者個人情報設定」画面で登録された患者様の情報を一覧で確認できるようになっています。

●一覧の項目の説明

・実施日

アンケート対象の患者様を登録した日が表示されます。

・患者ID

登録された患者様のIDが表示されます。

・患者名

登録された患者様の名前が表示されます。

・性別

登録された患者様の性別が表示されます。

・生年月日

登録された患者様の生年月日が表示されます。

・年齢

登録された患者様の年齢が表示されます。

・手術状況

登録された患者様の手術状況が表示されます。

「予定なし」・・・アンケート実施時点で手術の予定がない患者様であることを表しています。

「手術前」・・・アンケート実施時点で手術の予定がある患者様であることを表しています。

「手術後」・・・アンケート実施時点で手術をした患者様であることを表しています。

・年数1、年数2、月数1、月数2

手術状況が手術後の患者様の時に、手術した経過年月を年数と月数で分けて表示しています。

「年数1」、「月数1」・・・「患者個人情報設定」画面の「経過年月1」の年と月が表示されます。

「年数2」、「月数2」・・・「患者個人情報設定」画面の「経過年月2」の年と月が表示されます。

・回答状況

患者様のアンケートの回答状況が表示されます。対象となっているアンケートに全て回答済みの場合は「完了」と表示されます。対象のアンケートが全て終わっていない時は赤字で「未完了」と表示されます。

* 一覧で患者様が選択された状態になると、対象の患者様の行の背景が赤く反転します。

2013/12/12	2	テスト患者2	女	1970.01.01	43	予定なし	年	ヶ月	完了
2014/08/21	123	テスト患者3	男	1988/08/21	26	手術後	7年	0ヶ月	未完了

←患者様が選択された状態

●ボタンの説明

「アンケート回答対象患者選択・管理」画面上部にあるボタンの説明をします。



- ① 回答対象者を確定する
一覧で選択されている患者様のアンケートのメニュー画面に移動します。
- ② 患者情報を確認する
「患者個人情報設定」画面に移動し、一覧で選択されている患者様の登録内容を確認します。
- ③ 患者情報の新規登録
新規で患者様の情報を登録する時に使用します。「患者個人情報設定」画面に移動し、患者様の情報を入力します。
- ④ 患者情報を検索する
現在表示されている画面が検索モードになり、検索したい患者様の情報を該当する項目欄に入力できるようになります。
- ⑤ 患者検索を実行する
④で項目欄が入力できるようになった後、入力した検索条件をもとに登録されている患者情報から該当する患者様を探して結果を一覧に表示します。
- ⑥ 検索結果を解除する
④や⑤を実行した後、一覧に全件を表示させたい時に使用します。「検索結果を解除する」をタップすると一覧に登録されている患者様の情報が表示されます。
- ⑦ 管理画面 TOP ページ
「管理画面 TOP ページ」をタップするとメインメニューに戻ります。

※ 「⑤患者検索を実行する」と「⑥検索結果を解除する」のボタンは、「④患者情報を検索する」ボタンを押した時に画面上に表示されます。

また、「④患者情報を検索する」を押した時の「検索モード」の画面では、①～④のボタンと⑦のボタンは画面上には表示されません。

【患者個人情報設定】

患者様の情報を新規で登録したり個別の情報を確認したりする画面になります。患者様に実施するアンケートの選択もこの画面で行います。

患者個人情報設定

患者IDは数字のみを入力してください。

患者ID ID照会

患者名 性別

生年月日 年齢

病名で「99 その他」選択時は、病名を入力してください。

病名

手術状況 予定なし 手術前 手術後 術後2回目 術後3回目

【手術後の場合は下記にて手術日を入力して下さい。】

患側1 右側 左側

手術日1 経過年月1 年 ヶ月

患側2 右側 左側

手術日2 経過年月2 年 ヶ月

【アンケート対象に設定したいものにチェックを入れて下さい。】

頸椎アンケート

側弯症アンケート

腰椎アンケート

[回答対象者を確定してアンケートへ](#)

●患者 ID（必須入力）

患者様の ID を数字で入力します。

●患者名（必須入力）

患者様の氏名を入力します。

●性別（必須入力）

患者様の性別を入力します。

●生年月日（必須入力）

患者様の生年月日を入力します。

●年齢（入力不可）

生年月日をもとに自動計算して年齢を表示します。

●手術状況（必須入力）

患者様に該当するものにチェックを入れます。

「予定なし」・・・アンケート実施時点で手術の予定がない患者様の時はチェックを入れます。

「手術前」・・・アンケート実施時点で手術の予定がある患者様の時はチェックを入れます。

「手術後」・・・アンケート実施時点で手術をした患者様の時はチェックを入れます。

●患側 1、患側 2（任意入力）

手術状況の項目で「手術後」にチェックを入れている時のみ入力可能です。

手術を行った場所にチェックを入れます。（右腕を手術した時は「右側」にチェックを入れる。）

●手術日と経過年月の入力について

・手術状況が「手術後」の場合は「手術日 1」は必須入力になります。「手術後」以外の時は入力できません。

・「手術日 1」、「経過年月 1」の両方とも未入力の時は「手術日 2」と「経過年月 2」は入力できません。

・「手術日 1」又は「手術日 2」が入力済みの時は「経過年月 1」又は「経過年月 2」は入力できません。

・通常は「手術日 1」に手術日を入力します。2回以上手術を受けている場合は直近の2回の手術をそれぞれ手術日 1 と手術日 2 に入力します。

または、同じ患側を左右別々の日に手術した場合の日にちを登録する時は、「患側 1」、「患側 2」で患側部分にチェックを入れた上でそれぞれの手術日を入力してください。

※手術日の年と月のみ明らかで日にちが不明の時は、手術日には入力日の日にちを入力して下さい。

（例）入力日が2013年1月30日で手術日が「1980年12月」の時→1980年12月30日を入力

●日付の和暦入力について

・日付を和暦で入力する時は、最初に「M（明治）・T（大正）・S（昭和）・H（平成）」を入力して下さい。入力後は自動的に西暦表示に変換されます。

（例）平成1年1月1日の時は、「H1/1/1」（又はH1.1.1）と入力する。

⇒入力確定後、西暦表示の「1989/01/01」（又は 1989.01.01）に変換される。

●アンケート対象にチェックを入れる

【アンケート対象に設定したいものにチェックを入れて下さい。】

あなたの状態について

アンケート 2 について

アンケート 3

画面下に登録されているアンケート名が表示されているので、患者様に実施するアンケート前にある四角のチェックボックスをタップして対象アンケートにチェックを入れてください。もう一度タップするとチェックは外れます。

一人の患者様に対して複数のアンケートを選択して実施することができます。

●ボタンの説明

「患者個人情報設定」画面上部にあるボタンの説明をします。



① 患者一覧に戻る

「アンケート回答対象患者選択・管理」画面に戻ります。「患者個人情報設定」画面で必須項目が入力されていない場合はメッセージが表示されます。

② 入力内容をクリア

「患者個人情報設定」画面で入力されている内容をすべて削除します。ボタンをタップしたら確認メッセージが表示されるので「OK」をタップすると入力されている内容が削除されます。

* 対象の患者様が一間でもアンケートに答えている場合は、削除できません。

③ 管理画面 TOP ページ

「患者個人情報設定」画面からはメインメニューの画面に移動できないので使用できません。

●回答対象者を確定してアンケートへ



必要な内容を入力したら画面下の「回答対象者を確定してアンケートへ」をタップします。タップすると該当患者様の実施アンケート一覧の画面に移動します。

【アンケートメニュー画面】

選択した患者様のアンケートを選択する画面になります。「患者個人情報設定」画面で選択したアンケートが画面に表示されます。

●管理画面ボタン



画面右上にある管理画面ボタンをタップするとメインメニューの画面に戻ります。

メインメニューに戻るにはPASSWORDの入力が必要になります。

・画面上部には「患者個人情報設定」で入力した患者様、または「アンケート回答対象患者選択・管理」画面で選択した患者様のID、氏名、性別、年齢が表示されます。

●アンケート名表示部分について



① アンケート名

アンケートの名前が表示されます。

② 回答状況

回答状況が表示されます。

「未完了」・・・対象のアンケートに全て回答していない状態。

「完了」・・・対象のアンケートが全て回答終了である状態。

③ 進捗率

進捗率を表示することで、アンケートの途中で中断した場合も状況がわかるようになっています。

対象のアンケートと全質問数と回答済みの質問数をもとにどれくらい回答が終わっているのかをスクロールバーとパーセンテージで進捗率を表示します。

アンケート名表示部分をタップすると、タップしたアンケートの開始画面に移動します。

【アンケート開始画面】

アンケートの概要や注意点などを表示するための、開始画面になります。

- ・画面上部には、アンケートのタイトルと、患者様の名前、性別、年齢が表示されます。

アンケートを開始していただく前に、再度この画面で「アンケートタイトル」、「対象患者」が間違いないが確認してください。

- ・アンケート MENU ボタン
画面右上にある「アンケート MENU」ボタンをタップするとアンケートメニュー画面に戻ります。



●アンケート概要・アンケートの注意点やその他の情報

各アンケートの「管理メニュー」の「基本情報設定」画面で入力された内容が表示されます。

① アンケート概要

アンケートの目的やどのような内容のアンケートなのかが表示されるようになっています。

② アンケートの注意点やその他の情報

アンケートを行う上での注意点など、アンケート前に回答者に説明しておくことが表示されます。

●アンケートに答える

「アンケート開始画面」の下にある「アンケートに答える」ボタンをタップすると、アンケートの回答画面に移動します。



【アンケート回答画面】

患者様にアンケートに回答していただく画面です。「アンケート管理メニュー画面」の「アンケート内容 登録・編集画面」で登録したアンケートの質問内容や選択肢が表示されます。質問に該当する選択肢をタップしたり、テキストを入力したりして回答を行っていきます。質問は一画面に一つ表示されます。

・アンケート MENU ボタン

画面右上にある「アンケート MENU」ボタンをタップすると回答を中断してアンケートメニュー画面に戻ります。



「アンケート MENU」ボタンをタップすると確認メッセージが出ます。メッセージに対して「OK」をタップするとアンケートメニュー画面に戻ります。


回答を中断した時に、再度そのアンケートを再開する時は、回答済みの最後のページから表示されます。

●回答形式


質問に対しての回答方法として以下の4つの形式が設けてあります。回答形式は質問・選択肢を登録する際に選択します。

(1) 単一選択・・・質問に対して表示されている選択肢の中から一つだけ選び回答します。選択肢をタップすると回答が入力されます。

* 複数の選択肢をタップしても、最後にタップした選択肢しか選択されないようになっています。

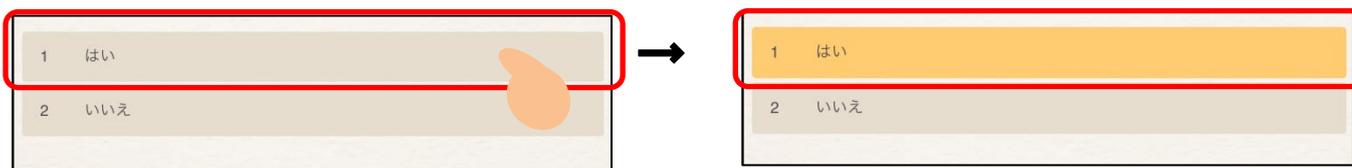


(2) 複数選択・・・質問に対して表示されている選択肢の中から複数の選択肢を選び回答します。選択肢をタップすると回答が入力されます。

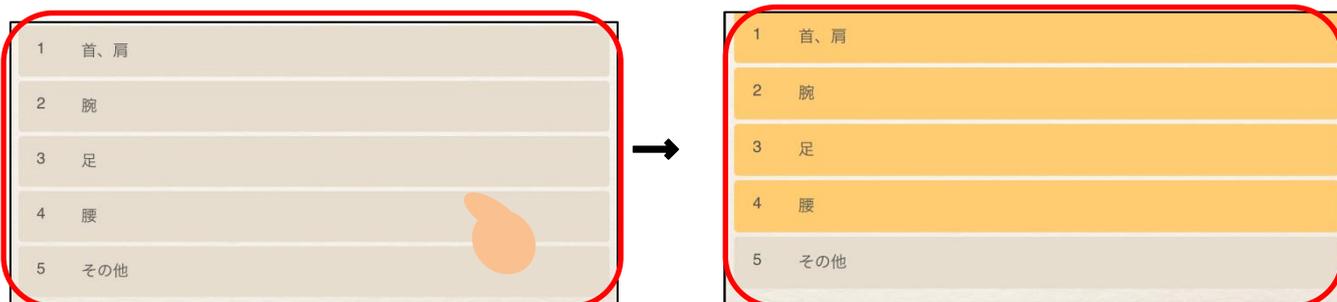

* 単一選択と複数選択は該当する選択肢をタップすると選択肢がオレンジ色に反転します。

* 単一選択と複数選択の選択を取り消す時は、もう一度タップすると背景が元に戻り選択が取り消されます。

(3) 記述・・・質問に対して文章を入力して回答します。

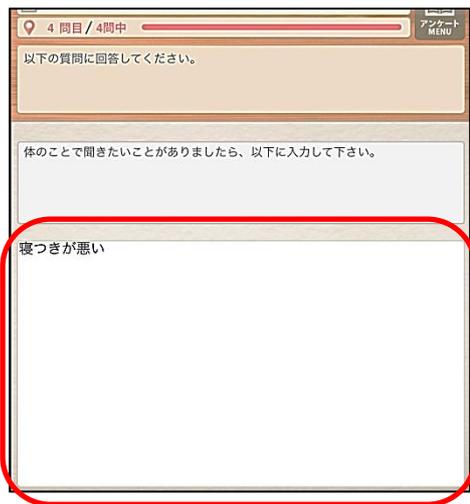


記述を行う画面では、左図のように画面の下にテキストの入力欄が表示されます。

入力欄をタップすると文字を入力できます。



(4) スライダー・・・質問に対してスライダーを用いて回答します。


痛みの具合などを直感的に示すことができます。

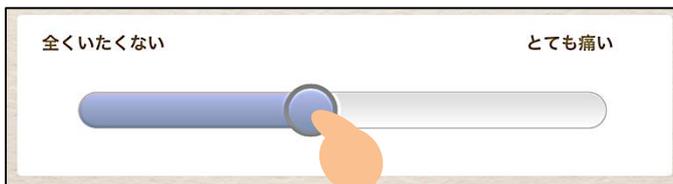

自分でこのあたり、という場所でタップ、もしくはつまみをスライドさせます。

● 「前へ戻るボタン」、「次へ進むボタン」

画面下の「前へ戻るボタン」、「次へ進むボタン」と次に進むボタンをタップすると質問が切り替わります。

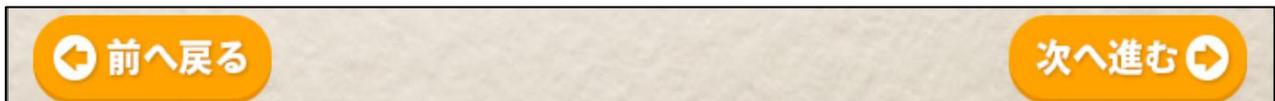

・「前へ戻るボタン」をタップすると一つ前の質問に切り替わります。表示されている質問が「アンケート開始画面」の場合は「アンケート開始画面」に移動します。

・「次へ進むボタン」をタップすると一つ後ろの質問に切り替わります。表示されている質問が最終質問の時は「アンケート終了画面」に移動します。

【アンケート終了画面】

全てのアンケートの回答が終わると終了画面が表示されます。



●メニューに戻るボタン



「メニューに戻る」ボタンをタップすると、「アンケート一覧画面」に戻ります。


●前へ戻るボタン

「前へ戻る」ボタンをタップすると、アンケート回答画面の最後の質問画面に移動します。

・「メニューに戻る」ボタンをタップしてアンケート一覧画面に戻ると、回答済のアンケートの状態に「完了」と表示されて、進捗率が「100%」で表示されます。




・選択されているアンケートに全部回答したら、「アンケート一覧画面」の上部に以下のメッセージが表示されます。

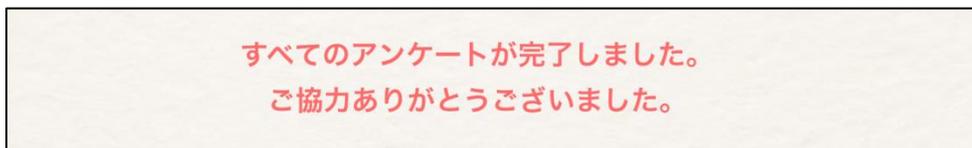

【回答済患者一覧】

患者様が回答したアンケート結果を確認するには「回答済患者一覧画面」から確認できます。

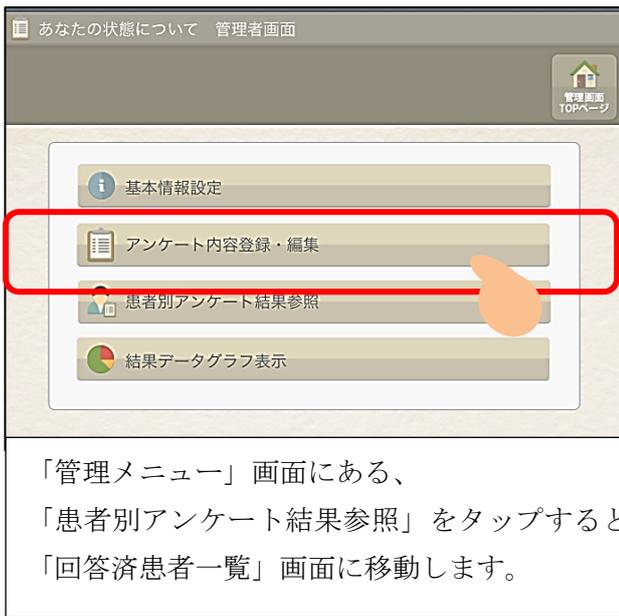

あなたの状態について 回答済患者一覧

実施日	患者ID	患者名	性別	年齢	手術状況	患側 患側	年数 年数	月数 月数	合計点
2013/12/12	1	テスト患者1	男	43	手術後	右側 左側	1年 1年	8ヶ月 1ヶ月	1
2013/12/12	2	テスト患者2	女	43	予定なし				1

「回答済患者一覧画面」では、実施日、患者ID、患者名などの他、アンケート結果に対する合計点を確認できます。

実施日	患者ID	患者名	性別	年齢	手術状況	患側 患側	年数 年数	月数 月数	合計点
2013/12/12	1	テスト患者1	男	43	手術後	右側 左側	1年 1年	8ヶ月 1ヶ月	1

●選択患者の結果を参照ボタン



回答済み患者一覧で選択された患者様の個別の回答結果を参照する「回答結果参照画面」に移動します。

実施日	患者ID	患者名	性別	年齢	手術状況	患側 患側	年数 年数	月数 月数	合計点
2013/12/12	1	テスト患者1	男	43	手術後	右側 左側	1年 1年	8ヶ月 1ヶ月	1
2013/12/12	2	テスト患者2	女	43	予定なし				1



一覧から結果を確認した患者様をタップして選択します。選択されると背景色が変わります。

対象患者様を選択した状態で、「選択患者の結果を参照」ボタンをタップすると、「回答結果参照画面」に移動し、患者様のアンケートの結果を確認できます。

【回答結果参照画面】

患者様ごとに、アンケートの回答内容を確認できます。

あなたの状態について 回答結果参照

患者ID 1 性別 男 手術状況 手術後
 患者名 テスト患者1 生年月日 1970.01.01 経過年月1 右側 1年8ヶ月
 実施日 2013/12/12 年齢 43 経過年月2 左側 1年1ヶ月

患者一覧に戻る 管理画面 TOPページ

質問№	回答形式	質問内容	点数
		回答内容	
1	単一選択	今朝は朝食を食べましたか？	1
		はい	
2	複数選択	痛みを感じる部分を選択してください。 複数選択可能です。	0
		首、肩、腰、その他	
3	スライダー	痛みの程度はどれくらいですか？ 下のスライダーを動かして回答してください。	0
		46	
4	記述	体のことで聞きたいことがありましたら、以下に入力して下さい。	0
		テスト	

合計点数 1

画面上部には患者様の情報が表示されます。

患者ID	1	性別	男	手術状況	手術後
患者名	テスト患者1	生年月日	1970.01.01	経過年月1	右側 1年8ヶ月
実施日	2013/12/12	年齢	43	経過年月2	左側 1年1ヶ月

●患者一覧に戻るボタン



患者一覧に戻るボタンをタップすると、「回答済み患者一覧画面」に移動します。

●回答結果

質問№	回答形式	質問内容	点数
		回答内容	
③ 1	② 単一選択	① 今朝は朝食を食べましたか？	④ 1
		⑤ はい	

- ① 質問No. … 質問登録画面で登録した、アンケートの質問番号が表示されます。
- ② 回答形式 … 質問登録画面で登録した、アンケートの回答形式が表示されます。
- ③ 質問内容 … 質問登録画面で登録した、アンケートの質問の文言が表示されます。
- ④ 回答内容 … 患者様が③の質問内容に対して回答した内容が表示されます。
- ⑤ 点数 … 質問登録画面で患者様が回答した選択肢に対して設定した点数が表示されます。

合計点数 1

画面の下には点数を合計した「合計点数」が表示されます。

【表示対象質問一覧画面】

回答の割合を円グラフで確認したい質問内容を選択するための画面です。



「管理メニュー」画面にある、「結果データグラフ表示」をタップすると、「表示対象質問一覧」画面に移動します。



この画面に表示される質問は、回答形式が「単一選択」と「複数選択」になっているものだけです。回答形式が「記述」と「スライダー」の質問はグラフ表示に対応していないため、「表示対象質問一覧画面」には表示されません。


● 選択問題のグラフを表示ボタン



「質問回答グラフ表示画面」に移動します。
一覧で選択された質問に対する回答割合のグラフを確認する際に使用します。

【質問回答グラフ表示画面】

「表示対象質問一覧画面」で選択した質問に対しての回答の割合を円グラフで確認できます。

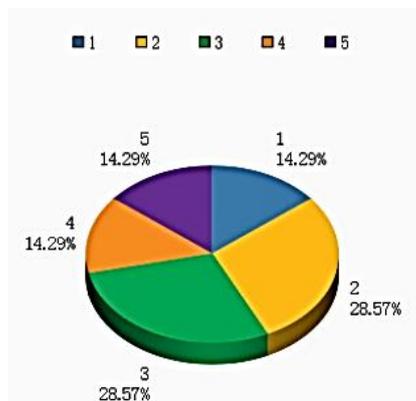

回答内容	件数	割合
首・肩	1	14%
腕	2	29%
足	2	29%
膝	1	14%
その他	1	14%

●質問一覧に戻るボタン



質問一覧に戻るボタンをタップすると、「表示対象質問一覧画面」に移動します。